

يُرجى قراءة الدليل كاملاً بعناية قبل بدء الاختبار.  
قد يختلف هذا الاختبار عن الاختبارات التي اعتدت على إجرائها في السابق.

# الدليل التفصيلي لإجراء الاختبار الذاتي لفيروس كوفيد-19 المُستجد الخاص بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (الاختبار السريع للأجسام المضادة)



إرشادات الاستخدام هذه تتعلق بالاختبار الذاتي لفيروس كوفيد-19 المُستجد الخاص بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (الاختبار السريع للأجسام المضادة) فقط.

يُوضَّح هذا الدليل كيفية اختبار نفسك أو أي شخص آخر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وإبلاغ النتائج إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

تتوفر إصدارات بلغات أخرى ومقاطع فيديو توضيحية على الموقع الإلكتروني:

[self-test-help-gov.uk/covid19](https://self-test-help-gov.uk/covid19)

# ما يجب عليك القيام به



15

دقيقة  
للإعداد

## الدليل التفصيلي

يتعين عليك قراءة التعليمات التالية بامعانٍ واتباع الخطوات بالترتيب الصحيح. يستغرق إجراء كل اختبارٍ ما يقرب من 15 دقيقة وتظهر النتائج بعد ذلك بنحو 30 دقيقة.

الصفحة	العنوان	القسم
6	تحضير منطقة إجراء الاختبار	1
7	التحقق من محتويات مجموعة الاختبار	
8	تجهيز الاختبار	2
10	أخذ عينة المسحة	3
11	إجراء اختبار لشخصٍ آخر	
12	مُعالجة عينة المسحة	4
14	قراءة نتيجة الاختبار	5
15	الإبلاغ عن نتيجة الاختبار	6
16	تفسير النتائج	7
17	أداء الاختبار	8
17	التخلّص الآمن من مجموعة الاختبار	9
18	تدوين نتائج الاختبارات	

**هناك شخصٌ واحدٌ من بين كل 3 أشخاصٍ مصابين بفيروس كوفيد-19 لا يعلم أنه مصاب به.**

ويمكننا إبطاء انتشار الفيروس والمساهمة في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في عائلاتنا ومجتمعنا عن طريق إجراء الاختبار الذاتي بصورة منتظمة.

## نصائح بشأن الاختبار

ثمة نصائح مفيدة وتعليمات ومربعات تحذيرية في مختلف أجزاء الدليل لمساعدتك. وباتّباع هذه التعليمات بعناية خطوة بخطوة، سيكون لديك فرصة أفضل بكثير للحصول على نتيجة موثوقة.

### الإرشادات والتحذيرات العامة

- استخدم مجموعة اختبار منفصلة لكل شخص؛ حيث يمكنك استخدام كل مُكوّن من مُكوّنات مجموعة الاختبار مرة واحدة فقط.
- تجنّب إعادة استخدامها مرة أخرى، وسيُعين عليك الإبلاغ عن نتائج اختبار كل شخص.
- إذا كنت تعاني من مشكلاتٍ في يديك أو بصرك، فقد تحتاج إلى شخصٍ ما لمساعدتك في عملية أخذ المسحة والاختبار.
- إذا كان لديك حليّة في إحدى فتحتي أنفك، خذ المسحة من فتحة الأنف الأخرى. إذا كان لديك حليّة في كلتا الفتحتين، أزل الحليّة من إحدى الفتحتين قبل أخذ المسحة.
- إذا كنت قد أُصبت بنزيفٍ في الأنف خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، خذ المسحة من فتحة الأنف الأخرى أو انتظر لمدة 24 ساعة.
- تجنّب تناول الطعام أو المشروبات لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل إجراء الاختبار لتقليل خطر إفساد الاختبار.
- صُممت مجموعات الاختبار هذه للاستخدام البشري فقط.

### نصيحة

يجب الاحتفاظ بمجموعة الاختبار في درجة حرارة الغرفة أو في مكانٍ جافٍ وباردٍ (2°م إلى 30°م). لا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة ولا تحفظها في الثلاجة أو المُبرّد.

يجب استخدام مجموعة الاختبار في درجة حرارة الغرفة (15°م إلى 30°م). إذا حُفظت مجموعة الاختبار في مكانٍ باردٍ (أقل من 15°م)، فيجب تركها في درجة حرارة الغرفة المعتادة لمدة 30 دقيقة قبل الاستخدام.

احتفظ بمجموعة الاختبار بعيداً عن متناول الأطفال.

## ما الداعي إلى إجراء اختبار ذاتي

تم تصميم مجموعة الاختبار الذاتي هذه للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، وهي عبارة عن اختبار مسحة للأنف والحنجرة للتحقق مما إذا كنت مصابًا أم لا.

الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض هم أولئك الذين يحملون الفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض.

### إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاصة بك إيجابية، فيمكنك:

- المساعدة في الحدّ من انتشار المرض، ويجب عليك وعلى أسرته عزل أنفسكم باتباع الإرشادات الحكومية المقررة:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

- إبلاغ الأشخاص الذين خالطتهم أو الأماكن التي زرتها خلال آخر 14 يومًا بضرورة الخضوع للاختبار للتحقق من احتمالية إصابتهم بعدوى كوفيد-19.

### إذا حصلت على نتيجة سلبية في اختبار كوفيد-19

من المرجح أنك لم تكن حاملًا للعدوى في وقت أخذ العينة. وبالرغم من ذلك، لا تُعد النتيجة السلبية للاختبار ضمانًا لعدم إصابتك بفيروس كورونا.

#### نصيحة

إذا كنت تعاني من أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) أو أصبت بالفيروس، فيرجى الاطلاع على إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) المتاحة عبر الإنترنت:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19)


في حال ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19) وساءت حالتك، أو لم تتحسن بعد مرور 7 أيام، فيجب عليك زيارة موقع الخدمة الإلكترونية المُقدمة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الرقم **111** على العنوان: **111.nhs.uk**. وإذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، فيمكنك الاتصال بالهيئة على الرقم **111**. وفي حالات الطوارئ الطبية، اتصل على الرقم **999**.

لا تتباطأ في طلب المساعدة إذا شعرت بالقلق. ثق في حدسك.


## من الأشخاص الذين يناسبهم هذا الاختبار



البالغين من العمر 18 عامًا فأكثر  
الاختبار الذاتي والإبلاغ عن  
النتائج، مع المساعدة عند اللزوم.

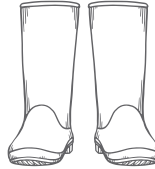

المراهقين  
ما بين 12 و17 عامًا  
الاختبار الذاتي والإبلاغ عن  
النتائج تحت إشراف البالغين.  
يمكن للشخص البالغ إجراء  
الاختبار عند الضرورة.

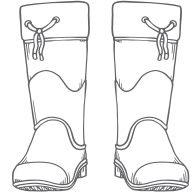

الأطفال دون 12 عامًا  
ينبغي إجراء الاختبار للأطفال  
دون 12 عامًا بواسطة  
شخص بالغ.  
لا تُجر هذا الاختبار إذا كنت لا  
تشعر بالثقة الكافية في قدرتك  
على إجرائه على طفل.

### كم عدد مرات إجراء الاختبار

تختلف عدد مرات إجراء الاختبار بناءً على ظروفك والتوجيهات الإرشادية الوطنية أو المحلية السارية.

### أين تجد دعمًا إضافيًا

يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عن الاختبار الذاتي على العنوان:

[gov.uk/covid19-self-test-help](https://gov.uk/covid19-self-test-help)

# 1- تحضير منطقة إجراء الاختبار

ستحتاج إلى ما يلي:

- مؤقت مثل ساعة اليد أو ساعة الحائط
- مناديل ورقية
- مرآة
- مُنظف أسطح
- مُعقم يدين أو صابونة أو مصدر للمياه الدافئة.

30 دقيقة




لا تأكل أو تشرب لمدة 30 دقيقة قبل الاختبار

1


اقرأ دليل الإرشادات هذا بعناية. يمكنك أيضًا مشاهدة مقطع فيديو عن كيفية إجراء اختبار المسحة عبر الإنترنت إذا كنت بحاجة إلى المزيد من المساعدة على العنوان:

[gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

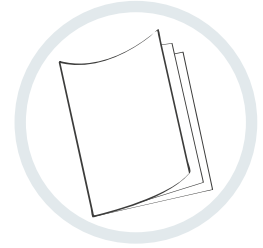

2

قبل بدء الاختبار مباشرة، يتعين عليك تنظيف أحد الأسطح المستوية وتطهيره وتجفيفه لوضع مجموعة الاختبار عليه.

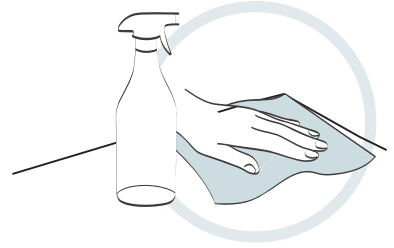

3

اغسل يديك جيدًا لمدة 20 ثانية، باستخدام الصابون والماء الدافئ أو مُعقم اليدين؛

في حال إجراء أكثر من اختبارٍ واحدٍ، نظّف السطح وَاغسل يديك مُجددًا بين كل اختبارٍ وآخر.


20  
ثانية





# التحقق من محتويات مجموعة الاختبار

يجب أن يكون لديك في عبوة الاختبار العناصر التالية:


4

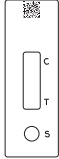

شريط الاختبار داخل عبوة مُحكمة الغلق

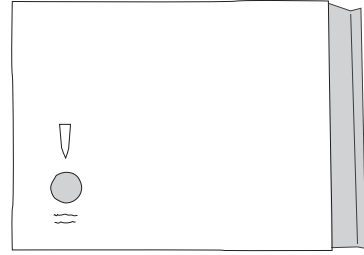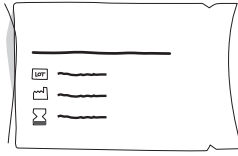

حامل أنبوب الاستخراج

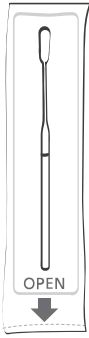

ماسحة داخل غلاف  
مُحكم الغلق



كيس مخلفات



أنبوب الاستخراج



أكياس  
محلول الاستخراج

## نصيحة

ماذا تفعل عند تلف شيء ما أو كسره أو فقدانه

إذا لاحظت وجود أي شيء تالف أو مكسور أو مفقود، فالرجاء عدم استخدام مجموعة الاختبار. يمكنك تقديم تعقيبات بهذا الشأن عن طريق الاتصال بمركز اتصال العملاء. الخطوط مفتوحة يومياً من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 11 مساءً.

اتصل على الرقم: **119** (مجاناً من جميع الهواتف الجوّالة والخطوط الأرضية). نحن نقدم الدعم بـ 200 لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة البريطانية.

إذا تعرّضت للأذى بسبب أحد الأجهزة، فإن الإبلاغ عنه قد يساعد الآخرين؛ لذا يُرجى الذهاب إلى الموقع الإلكتروني:

[coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk](https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk)

## 2- تجهيز الاختبار


5 أخرج شريط الاختبار من الحقيبة مُحكمة الغلق وضعها على السطح المُسطح النظيف.

### تحذير


بمجرد فتح الحقيبة، ابدأ الاختبار خلال 30 دقيقة.



6 ضع الأنبوب داخل حامل أنبوب الاستخراج (المُرْفَق داخل العبوة).

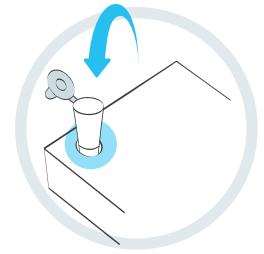


7 لَفِّ فوهة الكيس أو افتحه بعناية. يجب فتحه بعيدًا عن وجهك والحرص على عدم سكب أي كمية من السائل.

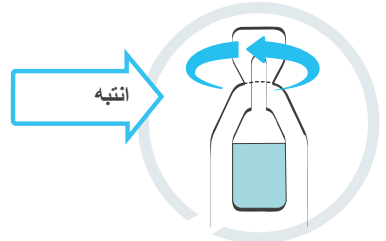

8 افتح أنبوب الاستخراج واضغط عليه برفق لإخراج كل السائل من الكيس إلى داخل الأنبوب.

احرص على عدم ملامسة الكيس للأنبوب. ضع الكيس في كيس المخلفات المُرْفَق ضمن مجموعة الاختبار.

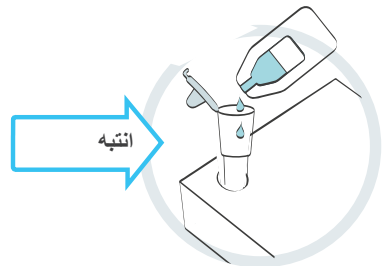




9 نظّف أنفك برفق باستخدام منديل ورقي وتخلّص منه في سلة قمامة مُغلقة.

إذا كنت تُجري الاختبار على طفلٍ، ساعده في تنظيف أنفه. يمثّل الغرض من ذلك في التخلص من المخاط الزائد.




10 اغسل يديك جيّدًا مرة أخرى لمدة 20 ثانية، باستخدام الصابون والماء الدافئ أو مُعقّم اليدين. إذا كنت تُجري هذا الاختبار على شخصٍ آخر، فيجب عليكما غسل أيديكم أو تعقيمها مُجددًا.

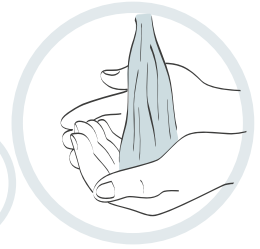


11 ستجد الماسحة داخل الغلاف مُحكم الغلق الموجود أمامك. حدّد الطرف المصنوع من نسيجٍ ناعمٍ.

#### تحذير

تجنّب ملامسة الطرف المصنوع من نسيجٍ ناعمٍ من الماسحة.

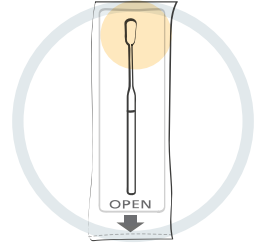

12 انزع غلاف عبوة الماسحة فقط عندما تكون مستعدًا لاستخدامها وأخرج الماسحة برفق.

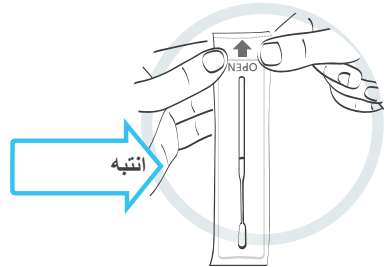

# 3- أخذ عينة المسحة


## تحذير

لا تلمس اللسان أو الأسنان أو الوجنتين أو اللثة أو أي سطح آخر بالطرف المصنوع من نسيجٍ ناعمٍ. إذا حدث تلامس مع أي شيءٍ آخر، فقد يتسبب ذلك في إفساد عينتك.  
لا تلمس طرف الماسحة المصنوع من نسيجٍ ناعمٍ بيديك.


في حال إجراء الاختبار على طفلٍ دون 12 عامًا، أو شخصٍ يحتاج إلى مساعدة، يجب اتّباع الخطوات الواردة في الصفحة 11

13 افتح فمك على اتساعه وافرك طرف الماسحة المصنوع من نسيجٍ ناعمٍ على اللوزتين برفق (أو على مكان اللوزتين).

كرّر هذه الخطوة مع الحرص على تحقيق احتكاك جيد بينهما 4 مرات على كل جانب (استخدم مصباحًا أو مرآة لمساعدتك في إتمام هذا الأمر). قم بإخراج الماسحة بعناية من حلقك.

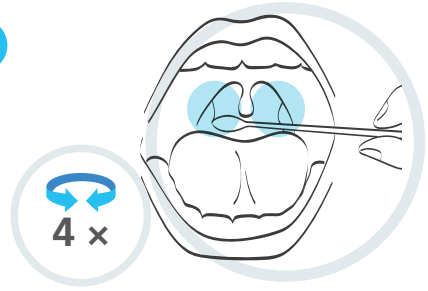


14 ضع نفس الماسحة برفق في إحدى فتحتي الأنف حتى تشعر بمقاومة خفيفة (بعمق 2.5 سم تقريبًا داخل أنفك).

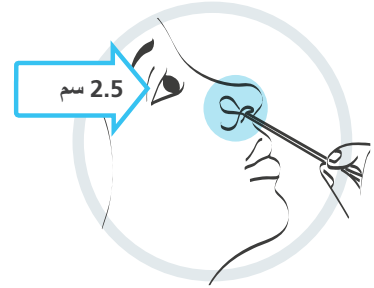

15 امسح الماسحة برفق حول محيط فتحة الأنف من الداخل بعمل 10 دوائر كاملة. لا يلزم استخدام القوة.

قد يتسبب هذا الإجراء في الشعور بعدم الارتياح. تجنّب إدخال الماسحة بعمقٍ أكبر إذا شعرت بمقاومة كبيرة أو ألم.

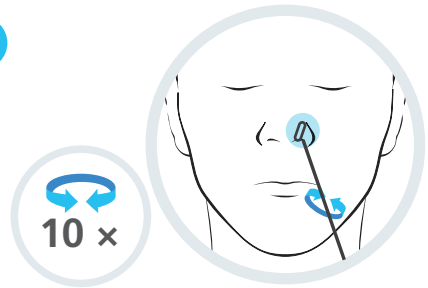

# إجراء اختبار لشخصٍ آخر

يجب إجراء الاختبار للأطفال دون 12 عامًا بواسطة شخصٍ بالغ. اتَّبِع التوجيهات الإرشادية بشأن كيفية تجهيز الطفل أو الشخص الذي يطلب المساعدة وإجراء الاختبار عليه. يمكنكم الاطلاع على مقطع فيديو توضيحي على الموقع الإلكتروني: [gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help](https://gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help)

إذا كنت تجري اختبارًا لطفل ما، ضع مجموعة الاختبار أمام الطفل وأطلعته على الخطوات. إن أمكن، اجلس الطفل في حجر شخصٍ ما أو اطلب من أحدهم إمساك يده.  
اطلب من الطفل أن ينظف أنفه بمنديل ورقي آخر. ضع المنديل الورقي في سلة قمامة مُغلقة.

13  
أمسك الماسحة بيدك، واطلب من الطفل فتح فمه بأقصى اتساع له وإمالة رأسه إلى الخلف. افرك طرف الماسحة المصنوع من نسيجٍ ناعمٍ على اللوزتين برفق (أو على مكان اللوزتين).


كرّر هذه الخطوة 4 مرات على كل جانبٍ مع الحرص على تحقيق احتكاك جيد بينهما. أخرج الماسحة بعناية.



14  
ضع الطرف المصنوع من نسيجٍ ناعمٍ من الماسحة برفق في إحدى فتحتي الأنف لديه لحين الشعور بمقاومة خفيفة.



15  
امسح الماسحة برفق حول محيط فتحة الأنف من الداخل بعمل 10 حركات دائرية.  
في حال عدم مسح اللوزتين، قم بمسح فتحتي الأنف بعمل 10 دوائر كاملة في كل فتحة.

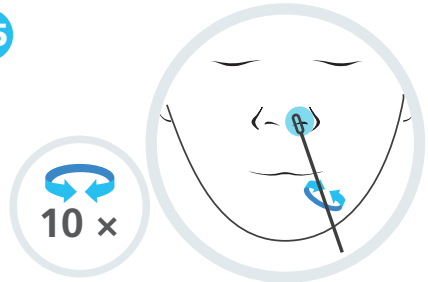


# 4- مُعالجة عينة المسحة

## نصيحة

للحصول على أفضل أداء، عليك فحص المسحة في أقرب وقتٍ ممكنٍ بعد أخذ المسحة من فتحة أنفك.

16 التقط أنبوب الاستخراج وضع طرف الماسحة المصنوع من نسيج ناعمٍ داخل الأنبوب بحيث يكون مغموراً في السائل.


اجعل طرف الماسحة ملاصقاً للجوانب الداخلية لأنبوب الاستخراج، ثم قم بتدوير الماسحة لمدة 15 ثانية. يتمثل الغرض من ذلك في نقل العينة إلى السائل.

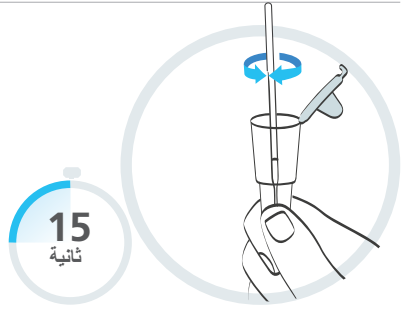

17 اضغط على أنبوب الاستخراج معتصراً الماسحة في أثناء إخراجها.

تأكد من استخراج السائل بالكامل من الطرف الناعم للماسحة.


ضع المسحة في كيس المخلفات المُرفق ضمن مجموعة الاختبار.

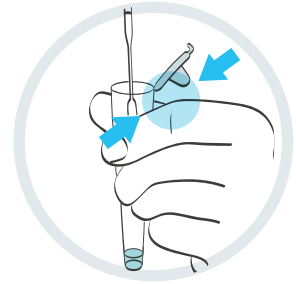


18 اضغط على غطاء أنبوب الاستخراج بقوة لإحكام غلقه وتجنّب أي تسرّب.

## نصيحة

اغسل يديك مجدداً بعد الانتهاء من هذه الخطوة.

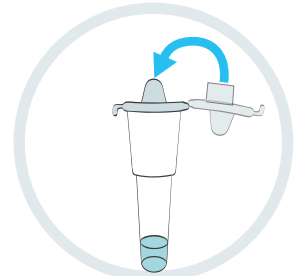


19 تأكد من أن مجموعة الاختبار موضوعة على سطح نظيف ومسطح.  
يُحظر تحريك الشريط في أثناء الاختبار.

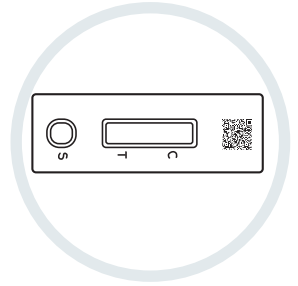


20 اضغط على أنبوب الاستخراج برفق لوضع قطرتين من السائل على فتحة استقبال العينة على شريط الاختبار.

تأكد من نزول قطرات السائل وليس فقاعات هوائية. ضع قنينة جمع العينات في كيس المخلفات مع الماسحة.

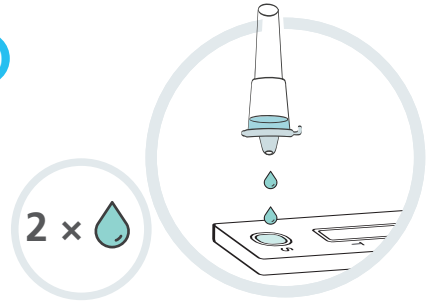

21 اضبط المؤقت وانتظر لمدة 30 دقيقة قبل قراءة نتيجة الاختبار.

يمكن أن تظهر نتيجة إيجابية للاختبار في أي وقتٍ بعد مرور 20 دقيقة، ولكن يجب عليك الانتظار لمدة 30 دقيقة كاملة لتسجيل نتيجة سلبية حيث يحتاج خط الاختبار (T) تلك المدة لكي يظهر.

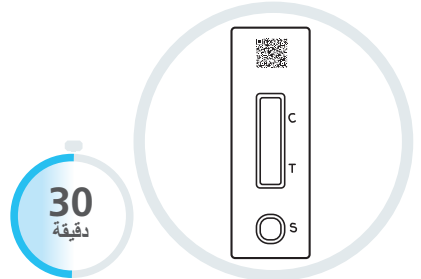

تعرف على كيفية قراءة نتيجة الاختبار والإبلاغ عنها في الصفحة التالية. <<

# 5- قراءة نتيجة الاختبار

## ملاحظة مهمة


30  
دقيقة

لا تترك الاختبار لمدة أكثر من 30 دقيقة حيث يمكن أن تصير النتيجة غير صالحة.

## نتيجة إيجابية




يظهر خطان. يجب أن يظهر خط ملون واحد في منطقة خط التحكم (C)، ويظهر خط ملون آخر في منطقة خط الاختبار (T). يشير ظهور خطين، أحدهما بجانب الحرف C والآخر بجانب الحرف T، حتى وإن كان الخطان باهتين، إلى أن نتيجة الاختبار إيجابية.

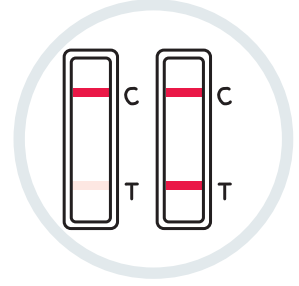


## ملاحظة مهمة

إذا كانت نتيجة الاختبار الخاص بك إيجابية، فيجب عليك وعلى أفراد أسرتك اتباع التوجيهات الحكومية الخاصة بالعزل الذاتي:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/)

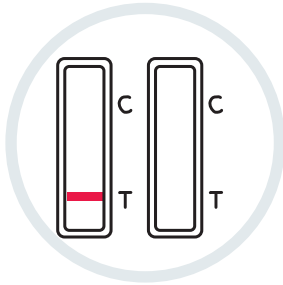

نتيجة غير صالحة  
خط التحكم (C) لا يظهر.

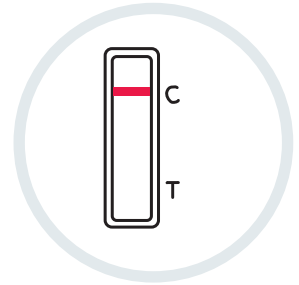

نتيجة سلبية  
يظهر خط ملون واحد في منطقة خط التحكم (C). لا يظهر أي خط في منطقة خط الاختبار (T).



# 6- الإبلاغ عن نتيجة الاختبار

## يجب عليك إبلاغ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بنتائجك الإيجابية والسلبية وكذلك النتائج غير الصالحة.

يعمل تسجيل جميع النتائج على مساعدة العلماء في تحديد نطاق انتشار الفيروس الجديد وتقديم مشورة بشأن كيفية الاستجابة لها. في حالة إبلاغ الأشخاص عن نتيجة إيجابية فقط، فإن مستويات الحالة تظهر في مستوى أعلى مما تكون عليه فعليًا.

لذا حتى إذا كانت نتيجتك سلبية أو غير صالحة، يجب عليك الحرص على أن تكون المعلومات الموجودة بحوزة هيئة الخدمات الصحية الوطنية دقيقة.

تحتاج إلى تسجيل رمز الاستجابة السريعة (QR) أو رقم المُعرِّف الموجود تحته، للإبلاغ عن النتيجة.

### الإبلاغ عن النتائج عبر الإنترنت (الطريقة الأسرع)

إذا كنت تعيش في إنجلترا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني:

[gov.uk/report-covid19-result](https://www.gov.uk/report-covid19-result)


إذا كنت تعيش في أسكتلندا، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني:

[covidtest.scot](https://www.covidtest.scot)

### أو الإبلاغ عن النتائج عبر الهاتف

اتصل على الرقم: **119**

الخطوط مفتوحة يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، (يمكن الاتصال عبر الهواتف الجوّالة والهواتف الأرضية مجانًا)

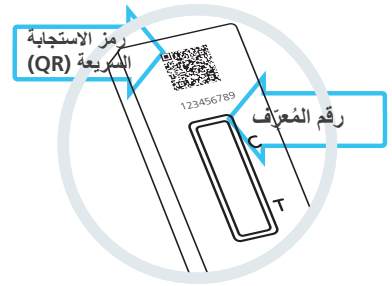

## لا يكتمل اختبارك إلا بعد إبلاغك عن النتيجة

### نتيجة إيجابية



إذا حصلت على نتيجة إيجابية، فهذا يعني أنك مصابٌ حاليًا بفيروس كوفيد-19 ويُحتمل نقل العدوى للآخرين. وعند الإبلاغ عن نتيجة اختبارك، ستحصل على المزيد من المعلومات عن الخطوات التالية الواجب عليك اتخاذها.

#### تحذير

يجب عليك وعلى أي شخص يعيش معك وأي شخص في مجموعة الدعم الخاصة بك، الخضوع للعزل الذاتي وفقًا للإرشادات الوطنية والمحلية الحالية، والتي يمكن الاطلاع عليها على الموقع الإلكتروني:

[nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/](https://nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/self-isolation-and-treatment/)

### نتيجة سلبية



إذا حصلت على نتيجة سلبية، فمن المرجح أنك لم تكن حاملًا للعدوى في وقت أخذ العينة. وبالرغم من ذلك، لا تُعد النتيجة السلبية للاختبار ضمانًا لعدم إصابتك بفيروس كوفيد-19.

إذا جاءت نتيجة اختبارك سلبية، فيجب عليك مواصلة اتباع القواعد والتوجيهات الإرشادية الوطنية والمحلية والتي تشمل غسل اليدين بانتظام ومراعاة التباعد الجسدي وارتداء أغطية للوجه، عند اللزوم.

إذا ظهرت عليك أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو سعال غير معتاد ومستمر أو فقدان حاسني التنوق أو الشم أو حدث تغييرٌ فيهما، فيجب عليك وعلى أسرته الخضوع للعزل الذاتي وتقتضي الإرشادات الخضوع لاختبار آخر على:

[gov.uk/get-coronavirus-test](https://gov.uk/get-coronavirus-test) أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالعملاء على الرقم: 119. الخطوط مفتوحة يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.



## نتيجة غير صالحة



إذا حصلت على نتيجة غير صالحة، فهذا يعني أنه لم يتم إجراء الاختبار على نحو صحيح. تحتاج إلى استخدام اختبار تدفق جانبي آخر من الحزمة. لا تعيد استخدام أي شيء من مجموعة الاختبار الأول، وابدأ بإجراء الاختبار من الخطوة 1.

## في حال استمرار المشكلة

في حال استمرار المشكلة، توقف عن استخدام مجموعات الاختبار على الفور. في حال عدم توفر اختبار آخر، يمكنك إجراء نوع مختلف من الاختبارات من خلال تطبيق NHS COVID-19، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: [gov.uk/get-coronavirus-test](https://www.gov.uk/get-coronavirus-test) أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالعملاء على الرقم: 119. الخطوط مفتوحة يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

## 8 أداء الاختبار

من المرجح أن يعطي الاختبار نتيجة إيجابية إذا كان لدى الشخص مستويات عالية من فيروس كورونا (كوفيد-19).  
يعني ذلك أنه في الغالب سيكشف الأشخاص الحاملين للعدوى الذين يحتاجون إلى الخضوع للعزل الذاتي على الفور.

## 9 التخلص الآمن من مجموعة الاختبار

بمجرد الانتهاء من إجراء الاختبار، ضع جميع محتويات مجموعة الاختبار المستخدمة في كيس المخلفات المرفق ضمن المجموعة وضع هذا في النفايات المنزلية العامة الخاصة بك.  
اغسل يديك جيدًا بعد التخلص من المحتويات.





## تحتوي مجموعة الاختبار الخاصة بك على المواد التالية

المكونات	3-عبوات	7-عبوات
إرشادات الاستخدام (هذه الوثيقة)	1	1
صندوق مع فتحة حامل أنبوب	1	1
شريط اختبار مع عبوة مغلقة	3	7
أكياس محلول الاستخراج	3	7
حامل أنبوب الاستخراج	3	7
ماسحة داخل غلاف مُحكم الغلق	3	7
كيس المخلفات	3	7
	رمز المنتج TK2196	رمز المنتج TK2193

يُمنع تداول هذا الجهاز إلا كجزءٍ من خطة النشر الخاصة بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) بموجب برنامج الاختبار والتتبع المُقدم من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

**الجهة المُصنّعة:** وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، 39 شارع فيكتوريا، وستمنستر، لندن، 0EU SW1.



تم التصنيع بموجب العقد مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بواسطة: شركة شيامن بيوتاييم المحدودة للتكنولوجيا الحيوية. 4F/3F/2F، رقم 188، طريق جنوب منطقة بينغ تشينغ، شارع هايسانغ، مقاطعة هايسانغ، شيامن، فوجيان، 361026، جمهورية الصين الشعبية.

#### فهرس الرموز

يحتوي على ما  
xx يكفي لعدد xx  
اختبار



الجهة المُصنّعة



مُعقم باستخدام أكسيد  
الإيثيلين



يُحفظ في درجة  
حرارة بين 2 - 30°م



يُحظر الاستخدام  
إذا كانت العبوة  
تالفة



جهاز طبي تشخيصي  
للاستخدام في المختبر



تاريخ الاستخدام



رقم الدفعة



إعادة التدوير



يُحظر إعادة  
الاستخدام



تاريخ التصنيع



يُحفظ بعيداً  
عن أشعة الشمس



تنبيه



اتّبع إرشادات  
الاستخدام



يُحفظ جافاً



جميع المعلومات والصور الواردة في هذه الوثيقة صحيحة اعتباراً من 18 يونيو 2021.

الإصدار 1-3-4